

## Minivator 2000 auf einen Blick

Sitzoptionen	2000	
Polsterauswahl	✓	Eine Auswahl von sechs Polsterfarben ermöglicht eine Abstimmung auf Ihre Einrichtung.
Intelligente Sicherheit	o	Bringt den Treppenlift automatisch in die sicherste Parkposition, um Notzugang zu gewährleisten.
Elektrische Drehfunktion	o	Macht das Drehen des Sitzes zum Ein- und Absteigen auf dem Treppenabsatz so leicht wie möglich.
Einziehbarer Sitzgurt	✓	Dieser einziehbare Gurt kann entweder seitlich oder in der Mitte geschlossen werden.
Sitzgurt mit Klettverschluss	o	Dieser schwarze Gurt hat an beiden Enden Klettband, damit er sicher in Position gehalten wird.
Hochsitz	o	Ideal für Benutzer mit Bewegungsbehinderung an Hüft- oder Kniegelenk.

Fußstützenoptionen	2000	
Manuell	✓	Die Fußstütze wird manuell hoch- und herunter geklappt.
Vom Sitz betätigt	o	Klappt die Fußstütze hoch, wenn der Sitz hochgeklappt wird.
Von der Armlehne betätigt	o	Die Fußplatte kann im Sitzen mit einem Schalter unter der Armlehne Hoch- oder herunter geklappt werden.

Schienenmerkmale	2000	
Fahren um Ecken und Kurven	✓	Für eine umfangreiche Reihe an Treppen, angefangen von denjenigen, die um eine Ecke oder über mehrere Stockwerke führen bis zu Wendeltreppen.
Mehrere Ladestationen	✓	Fahren Sie den Lift mit der Fernbedienung zu den Ladestationen.
Schiene in beliebiger Farbausführung	o	Passen Sie die Kurvenschiene des Treppenlifts Ihrer Einrichtung an.
Min. Schienenüberhang oben	o	Zur Verwendung wenn ein Türbereich oben an der Treppe durch die Schiene behindert wird.
Automatische Klappschiene	o	Versetzt die Schiene automatisch, während der Treppenlift fährt und hält somit den Türbereich frei.

Gewichtskapazität	2000
Standardmaximalgewicht	115 kg
Max. mit Heavy-Duty-Kit	137 kg

Normenerfüllung	2000
BS5776: Treppenlifte	✓
ISO9386: Treppenlifte	✓

### Farbauswahl für Polster Minivator 2000



✓ Als Standard erhältlich o Optional

**Sebastian Hauck**  
Velken 83  
53809 Ruppichteroth

Tel.: 022 95 - 90 99 599  
Fax: 022 95 - 90 99 598  
Mobil: 0177 - 333 7000

info@hauck-treppenlifte.de  
www.hauck-treppenlifte.de



**HAUCK**  
TREPPENLIFTE



**handicare**

Handicare Treppenlifte GmbH  
Gesellenweg 7  
D-32427 Minden  
Deutschland  
T +49 (0)571 973 398-0  
F +49 (0)571 973 398-33  
treppenlifte@handicare.de  
www.handicare.de

## Minivator Treppenlifte



## Minivator 2000

Kurventreppenlifte



**handicare**

# Die Vorteile eines Minivator 2000-Treppenlifts von Handicare

**Wenn Sie einen Treppenlift benötigen, der auch Kurven meistert und auf Wendeltreppen installiert werden kann, bietet Ihnen der Minivator 2000 eine sichere und zuverlässige Lösung.**

Als einer der weltweit führenden Hersteller für Treppenlifte hat Handicare bereits tausenden von Menschen geholfen, Ihre Probleme beim Treppensteigen zu beseitigen.

Der Minivator 2000 Treppenlift passt auf fast alle Treppen und bietet Ihnen alles was Sie von einem Treppenlift erwarten können. Zusätzlich können Sie sich noch für eine elektrische Drehfunktion Ihres



Sitzes oder ein automatisches hochklappen Ihrer Fußplatte als optionales Zubehör entscheiden. Mit einer Auswahl von Sitzpolsterfarben und Schienenfarben, können wir den meisten Farbwünschen gerecht werden.

Es wird oft irrtümlich angenommen, dass Treppenlifte an die Wand montiert werden. Der Minivator 2000 Treppenlift wird aber auf Ihren Stufen


und nicht an der Wand befestigt. Wie alle Handicare Treppenlifte arbeitet auch die Minivator 2000 mit Akkus. Das heißt, Sie brauchen keine Angst haben stehen zu bleiben, sollte einmal der Strom ausfallen.

Das kompakte Design und die Möglichkeit den Sitz und die Fußplatte hochzuklappen, halten die Treppe frei für andere Bewohner oder Gäste. Die Schiene des Liftes wird speziell für Ihre Treppe gefertigt und damit auch optimal auf Ihr Treppenhaus abgestimmt. Bei Bedarf ist eine elektrische und vollautomatische Klappschiene erhältlich.

Der Minivator 2000 wird immer mit 2 Fernbedienungen ausgeliefert. Damit können Sie Ihren Treppenlift jederzeit herbei rufen oder auf eine Ladestation senden.

## Mögliche Treppenkonfigurationen

Kurventreppenlifte haben Schienen, die spezifisch für Treppen, die um Ecken biegen, oder Wendeltreppen entwickelt wurden. Die auf den Diagrammen A, B und C abgebildeten Treppen sind lediglich einige Beispiele für Treppen, bei denen Kurventreppenlifte verwendet werden können. Alle Kurvenschienen werden nach Vermessen der jeweiligen Treppe auf Bestellung hergestellt.

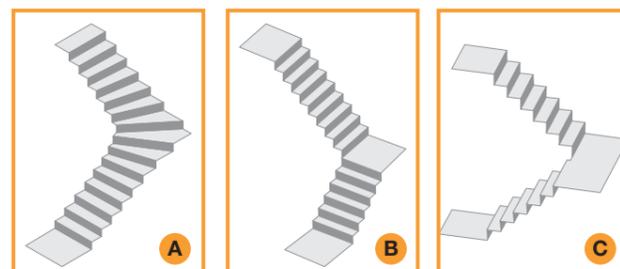

## Sicherheit als Standard

Ihr Minivator 2000 hat einen leicht zu öffnenden, automatischen Sicherheitsgurt und ist mit einer Reihe von Sicherheits-Sensoren ausgestattet, die dafür sorgen, dass der lift sofort anhält falls ein Hindernis auftaucht.



## Einfach zu Benutzen

Der Bedienhebel ist denkbar einfach in der Benutzung. Sie halten ihn einfach in die Richtung gedrückt, in die Sie fahren möchten und Ihr lift wird sich sanft in Bewegung setzen. Der Bedienhebel befindet sich am Ende der Armlehne, so dass die Armlehnen frei sind und Sie sich ungehindert dort abstützen können während Sie ein – oder aussteigen.



## Benutzerkomfort

### Elektrisch betätigte Klappschiene

In einigen Häusern ist die Eingangstür sehr nahe an der Treppe und es ist möglich, dass die Schiene im Weg ist. In diesen Fällen sollte eine automatische Klappschiene montiert werden. Somit kann die Schiene vom Eingangsbereich weggeklappt werden, wodurch der Eingang nicht behindert wird. Bei Betrieb des Bedienhebels hebt/senkt sich die Klappschiene automatisch.



### Elektrisch betätigte Drehvorrichtung

Wenn Sie oben an der Treppe ankommen, dann müssen Sie den Sitz drehen, damit Sie sicher auf den Treppenabsatz absteigen können. Wenn Sie die Option einer elektrisch betätigten Drehvorrichtung gewählt haben, dann wird diese durch Gedrückt halten des Bedienhebels, wenn Sie oben an der Treppe ankommen, aktiviert. Der Sitz dreht sich automatisch.

### Elektrisch betätigte Fußstütze

Fußstütze und Sitz können hochgeklappt werden, damit mehr Platz ist und die Treppe für andere Benutzer so frei wie möglich ist. Wenn Sie die Option der elektrisch betätigten Fußstütze wählen, dann müssen sie sich zum Hoch- und Herunterklappen der Fußstütze nicht bücken.